

DualDefence™

Sistema di controllo delle infezioni brevettato NSK

Gli strumenti NSK sono progettati con il Sistema di protezione DualDefence.



Il **Clean Head System** impedisce il risucchio dei liquidi nella testina e nella linea di scarico mentre la **valvola antiritorno** impedisce la contaminazione dell'acqua.

Clean Head System


Il meccanismo antirisucchio previene le contaminazioni crociate delle linee aria.

Valvola antiritorno

Il sistema antiritorno previene le contaminazioni crociate dell'acqua nelle turbine e nei micromotori.

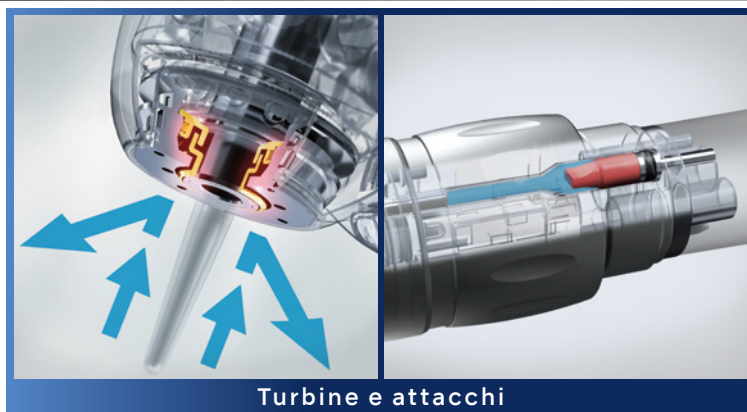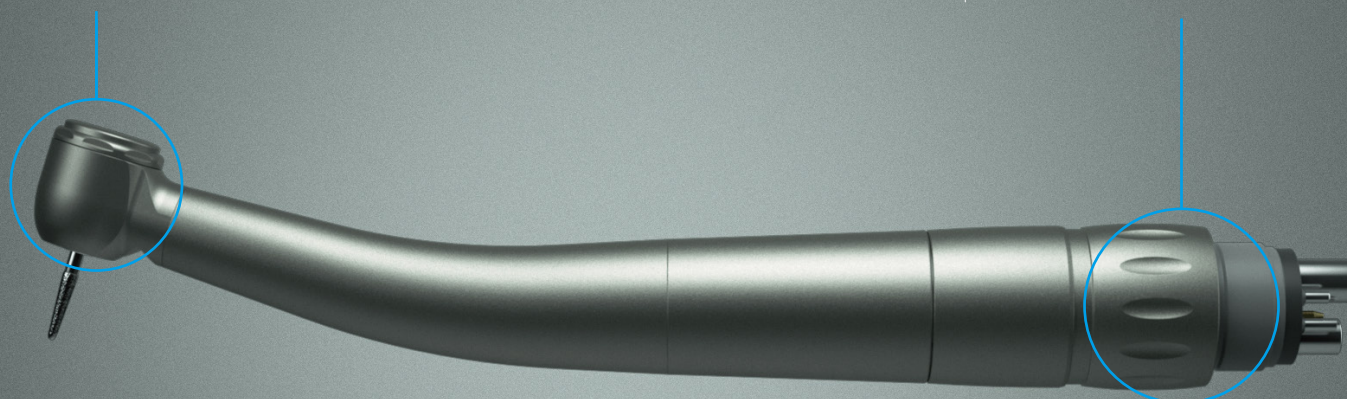

Turbine e attacchi

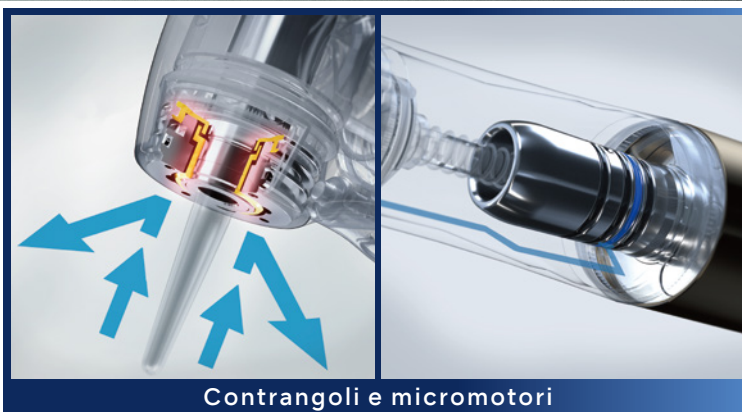

Contrangoli e micromotori

Tutti i manipoli NSK sono dotati di **Clean Head System** che previene il risucchio.

Tutti gli attacchi e i micromotori possiedono un **sistema antirisucchio** integrato.



L'efficacia del sistema DualDefence è stata testata e provata da rinomate Università, come University of Washington, Umeå University in Svezia e la National University of Singapore.

