


NSK

CREATE IT.

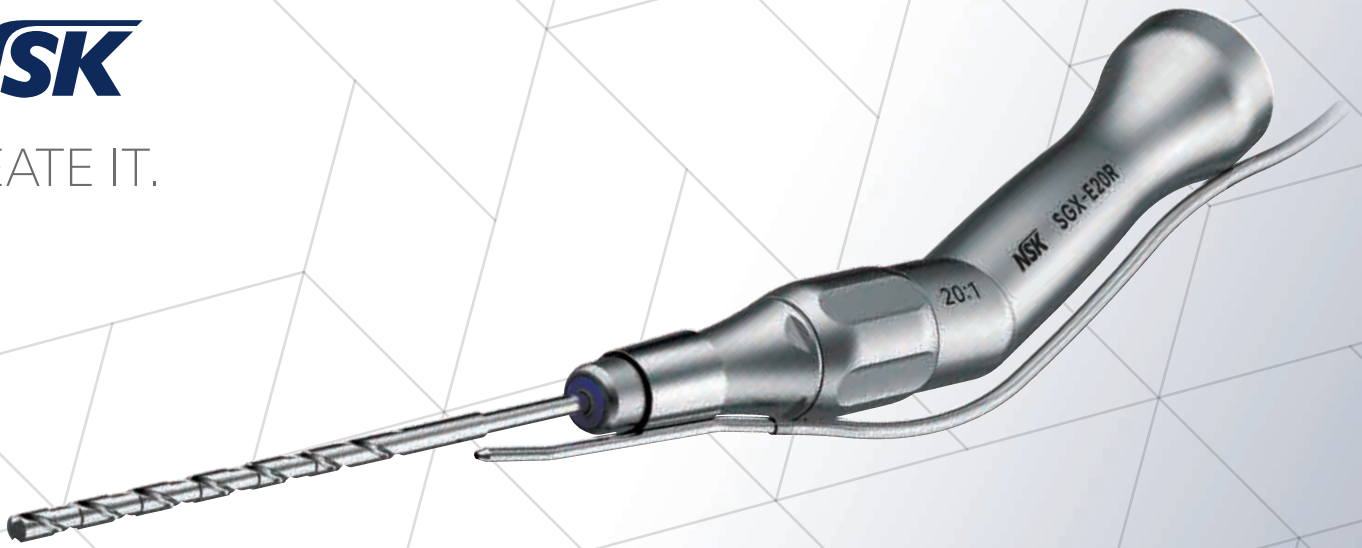

SGX-E20R

MANIPOLO PER IMPIANTI ZIGOMATICI E PTERIGOIDEI

La soluzione semplice ed efficiente per impianti zigomatici e pterigoidei

SGX-E20R può rendere il vostro trattamento implantare più facile ed efficiente. Approfittate della forma unica progettata specificamente per il trattamento implantare zigomatico e pterigoideo. Lo speciale sistema di sigillatura di NSK sulla punta dello strumento impedisce che materiale contaminante penetri nello strumento e la superficie liscia rende facile la decontaminazione.

L'angolo ottimale per gli impianti zigomatici e pterigoidei


Rispetto ad un contrangolo chirurgico convenzionale, SGX-E20R ha un'angolazione specifica che ottimizza l'accesso all'osso zigomatico e pterigoideo e migliora notevolmente la visibilità.





Raffreddamento efficiente grazie all'irrigazione esterna

L'irrigazione esterna di SGX-E20R permette di raffreddare efficacemente il campo operatorio e la fresa durante i trattamenti.

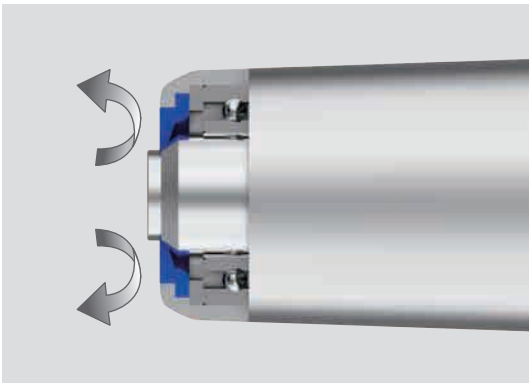

Sistema di sigillatura

Grazie al sistema di sigillatura si previene l'ingresso di contaminanti nello strumento, rendendo la decontaminazione più facile e prolungando così la vita dello strumento stesso.

20:1 Riduttore

Senza luce MODELLO: **SGX-E20R** CODICE: **HA1200**

- Corpo in acciaio inossidabile
- Max velocità: 2,000 min⁻¹
- Max Torque: 50 Ncm
- Mandrino a rotazione
- Manipolo angolare
- Raffreddamento esterno
- Per preparazione osteotomica/inserimento di impianti zigomatici e pterigoidei per maxillofaciale/chirurgia orale



Disinfezione termica



Autoclavabile a max 135°C

NAKANISHI INC. www.nsk-dental.com

700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan TEL: +81 289 64 3380 FAX: +81 289 62 5636

NSK Europe GmbH

Elly-Beinhorn-Strasse 8
65760 Eschborn, Germany
TEL: +49 6196 77606 0
FAX: +49 6196 77606 29

NSK France S.A.S.

32 rue de Lisbonne
75008 Paris, France
TEL: +33 1 56 79 59 80
FAX: +33 1 56 79 59 81

NSK United Kingdom Ltd.

Office 4, Gateway 1000, Arlington Business Park
Whittle Way, Stevenage, SG1 2FP, UK
TEL: +44 1438 310670
FAX: +44 1438 310671

NSK Dental Spain S.A.

C/Módena, 43 El Soho-Európolis
28232 Las Rozas de Madrid, Spain
TEL: +34 91 626 61 28
FAX: +34 91 626 61 32

NSK Dental Italy S.r.l.

Via dell'Agricoltura 21
36016 Thiene VI, Italy
TEL: +39 0445 820070
EMAIL: info@nsk-italy.it